


オプティチャンバー【スプレーサー】

《各部位の名称》

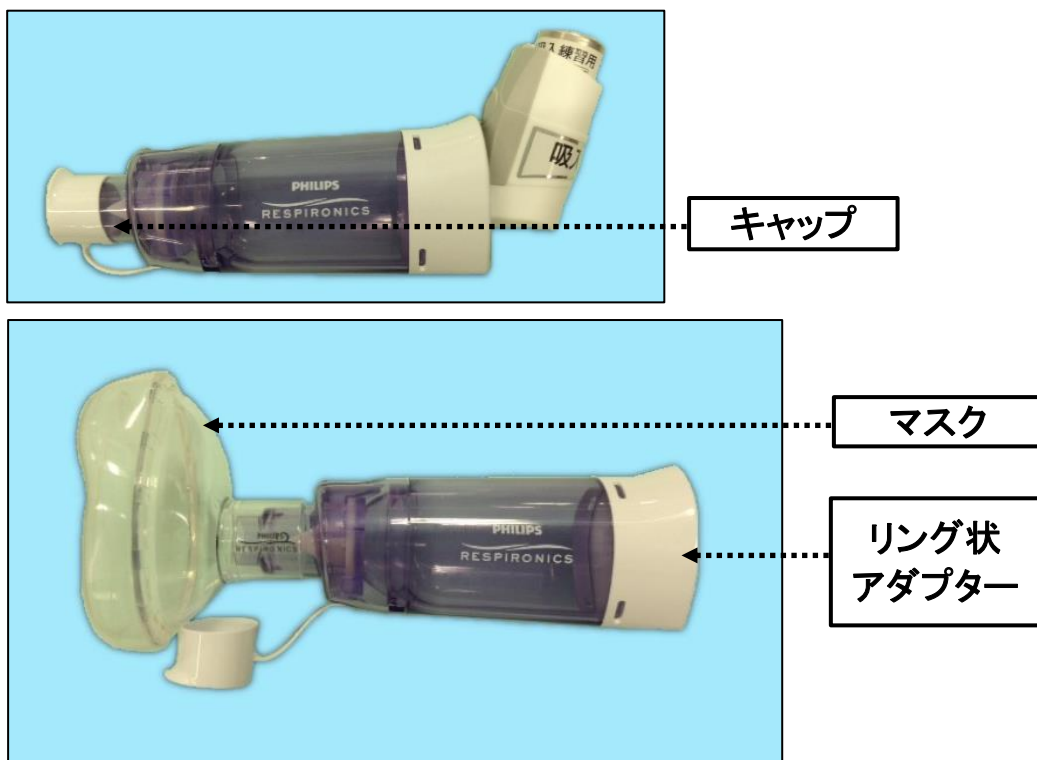

《吸入手順》

①	薬の準備	キャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。 リング状アダプターに吸入器を取り付けます。
②	吸入	吸入口を歯でかむ様にしくわえます。 (マスク使用時はマスクを密着させます。) ポンペを一度押し、スプレーサー内に薬剤を充填します。 スプレーサーをくわえたまま、ゆっくり深く吸い込みます。
③	息吐き	くわえたまま息を吐きます。 十分に吸入する為に、くわえたままで更に数回呼吸をして下さい。 (1～6回程度)
※1度に複数回吸入時は②に戻る		
④	後片付け	吸入器を外します。 スプレーサー本体の洗浄に関してはスプレーサー付属の説明書にしたがって下さい。
⑤	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

ボアテックス【スプレー】

《各部位の名称》



《吸入手順》

①	薬の準備	キャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。 リング状アダプターに吸入器を取り付けます。
②	吸入	吸入口を歯でかむ様にしくわえます。 (マスク使用時はマスクを密着させます。) ポンペを一度押し、スプレー内に薬剤を充填します。 スプレーをくわえたまま、ゆっくり深く吸い込みます。
③	息吐き	くわえたまま息を吐きます。 十分に吸入する為に、くわえたままで更に数回呼吸をして下さい。 (1～6回程度)
※1度に複数回吸入時は②に戻る		
④	後片付け	吸入器を外します。 スプレー本体の洗浄に関してはスプレー付属の説明書にしたがってください。
⑤	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。